

signia

StreamLine Mic

Käyttöohje



Sisältö

Ennen kuin aloitat	5
Johdanto	5
Pakkauksen sisältö	10
Osat	12
Johdatus laitteen käyttöön	14
Lataaminen	14
Kuulokojeiden yhdistäminen	17
Älypuhelimien tai musiikkisoittimien yhdistäminen	19
Yhdistämisen purkaminen	22

Päivittäinen käyttö	23
Kytkeminen päälle/pois päältä	23
Äänenvoimakkuuden säätäminen	24
Kuulokojeen mikrofoniin mykistäminen	25
① Puhelujen soittaminen	26
② Musiikin kuuntelu	30
③ Käyttäminen etämikrofonina	32
④ Käyttäminen kauko-ohjaimena	35
Tärkeitä turvallisuustietoja	36
Henkilöturvallisuus	36
Tuoteturvallisuus	43

Tärkeitä tietoja	46
Käyttötarkoitus / Tarkoitettu käyttö	46
Tilan ja virran merkkivalon yleiskatsaus	47
Symbolien selitykset	51
Huolto ja hoito	53
Tekniset tiedot	54
Tietoa hävittämisestä	56
Vaatimustenmukaisuustiedot	57

Ennen kuin aloitat



VAARA

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan läpi, ja noudata tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita vaurioiden tai vahingoittumisen välttämiseksi.

Johdanto

StreamLine Mic käyttää Bluetooth®* -tekniikkaa seuraavien toimintojen tarjoamiseksi.


* Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja tuotteen laillinen valmistaja käyttää tällaisia tavaramerkkejä lisenssin alaisuudessa. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat asianomaisille omistajilleen.

1 Kuulokkeet älypuhelimille

Älypuhelimien äänet suoratoistetaan kuulokojeisiisi StreamLine Micin välityksellä.

StreamLine Mic havaitsee äänesi ja lähettää sen älypuhelimeesi.


Lue lisää osasta ”Puhelujen soittaminen”.

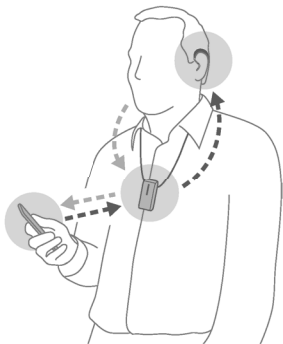

2 Kuulokkeet musiikille

Älypuhelimesta tai muusta Bluetooth-laitteesta kuuluva musiikki suoratoistetaan kuulokojeisiisi StreamLine Micin välityksellä.


Lue lisää osasta ”Musiikin kuuntelu”.

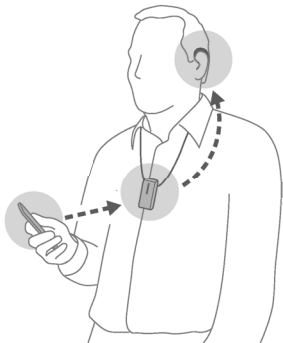

③ Etämikrofoni

Valitun puhujan ääni siirretään langattomasti StreamLine Micista kuulokojeisiisi.

Lue lisää osasta
”Käyttäminen etämikrofonina”.

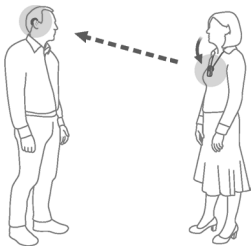


④ Kauko-ohjain

Kun StreamLine Mic ei suoratoista ääntä, voit käyttää sitä kuulokojeidesi kauko-ohjaimena.

Lue lisää osasta "Käyttäminen kauko-ohjaimena".


Pakkauksen sisältö

- 1 StreamLine Mic
- 2 Hihnat (eri pituuksia)
- 3 USB-kaapeli latausta varten
- 4 USB-virtakaapeli ja -pistoke (maakohtainen)

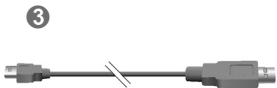

Osat


- 1 Mikrofonit
- 2 Virran merkkivalo 
- 3 Tilan merkkivalo 
- 4 Klipsi (pyörivä)
- 5 Monitoimipainike 
- 6 Äänenvoimakkuuspainikkeet  ja 
- 7 USB-portti latausta varten

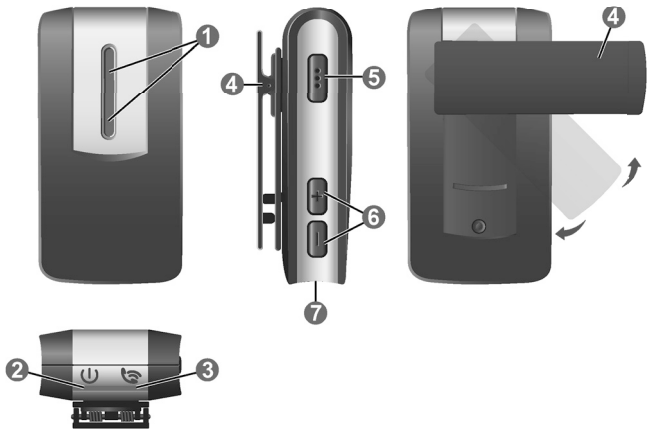


Johdatus laitteen käyttöön


Lataaminen

StreamLine Mic on osittain ladattu ennen toimitusta. Laite on ladattava täysin ennen käyttöä.

Kun virran merkkivalo  on punainen sinulla on noin 30 minuuttia striimausaikaa jäljellä.

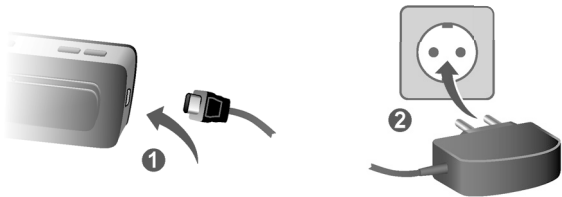

Viran merkkivalo osoittaa varauksen tason:

	Kuvaus
Punainen	Virta on vähissä
Vilkkuva vihreä	Ladataan (StreamLine Mic päällä)
Vilkkuva oranssi	Ladataan (StreamLine Mic pois päältä)
Hiipuva vihreä	Lataus on päättynyt (StreamLine Mic päällä)
Oranssi	Lataus on päättynyt (StreamLine Mic pois päältä)

Lisätietoa:

- Täysi lataus saavutetaan tyypillisesti 2 tunnissa.
- Varmista, että virtapistokkeen luo pääsee helposti, jotta se voidaan tarvittaessa irrottaa virtalähteestä.



HUOMAA

- ▶ Latauksen merkkivalo syttyy ladattaessa tässä käyttöoppaassa kuvatunlaisesti. Jos latauksen merkkivalo ei pala, irrota laite laturista ja ota yhteyttä kuulonhoidon ammattilaiseen.





HUOMAA

- ▶ Käytä ladattaessa StreamLine Mic mukana toimitettua alkuperäistä virtalähdettä 5,0 V/1A, CE- ja turvamerkitty.

Kuulokojeiden yhdistäminen




Kuulokojeet on yhdistettävä StreamLine Micn **kerran**.

Tämän jälkeen yhdistäminen tallennetaan kuulokojeisiin ja yhteys aktivoituu joka kerta, kun kojeet kytketään päälle.

- ▶ Varmista, että StreamLine Mic on pois päältä: Voit mykistää  painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.
- ▶ Kytke kuulokojeet pois päältä ja uudelleen päälle: Avaa ja sulje paristolokerot. Jos kuulokojeissa ei ole paristolokeroita, kytke ne pois päältä ja päälle käyttöohjeen mukaisesti.

Kuulokojeet ovat nyt valmiit yhdistämistä varten.


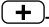

Viimeistele yhdistäminen 3 minuutin sisällä.

- ▶ Kytke StreamLine Mic päälle: Voit mykistää  painettuna, kunnes virran merkkivalo  vihreänä. Tämä vie noin 3 sekuntia.
Tilan merkkivalo  vilkkuu keltaisena.
- ▶ Aseta molemmat kuulokojeet StreamLine Micin lähelle (korkeintaan 20 cm päähän). Yhdistäminen käynnistyy automaattisesti.
Yhdistäminen on valmis, kun tilan merkkivalo palaa keltaisena.



Älypuhelimien tai musiikkisoittimen yhdistäminen

Älypuhelimesi (tai musiikkisoitin) on yhdistettävä StreamLine Miciin kerran. Sen jälkeen yhteys muodostetaan automaattisesti, kun StreamLine Mic kytketään päälle ja se on käyttöetäisyydellä.


- ▶ Pidä - ja -painikkeet painettuina samanaikaisesti, kunnes tilan merkkivalo  vilkkuu sinisenä. Tämä vie noin 6 sekuntia.

StreamLine Mic on nyt valmis yhdistämistä varten.

Viimeistele yhdistäminen 3 minuutin sisällä.

- ▶ Aseta älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi tilaan ”etsi muita Bluetooth-laitteita”. Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.

- ▶ Valitse älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi havaittujen laitteiden luettelosta "StreamLine Mic".
- ▶ Anna pyydettäessä PIN-numero "0000".




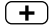

Yhdistäminen is valmis, kun tilan merkkivalo palaa  sinisenä.

Lisätietoja

- StreamLine Mic voidaan **yhdistää** korkeintaan kahdeksaan Bluetooth-laitteeseen. Vain yksi laite voi kuitenkin olla **liitettynä** kerrallaan.
- Kun yhdistettynä on useita laitteita:
 - StreamLine Mic luo yhteyden ensimmäiseen havaitsemaansa laitteeseen.
 - Voit vaihtaa laitetta poistamalla Bluetoothin käytöstä laitteissa, joita et halua juuri nyt käyttää.

Yhdistämisen purkaminen

Voit purkaa kaikki StreamLine Micin yhdistämiset älypuhelimiin ja musiikkisoittimiin seuraavasti:




- ▶ Sammuta StreamLine Mic: Pidä painiketta  painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.
- ▶ Pidä yhtä aikaa  painiketta **ja**  painiketta **ja**  painiketta painettuna 10 sekuntia.

Tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, kun yhdistämiset on purettu. Kuulokojeesi on edelleen yhdistettynä StreamLine Miciin.



Päivittäinen käyttö

Kytkeminen päälle/pois päältä



Käynnistäminen:

- ▶ Pidä painiketta  painettuna, kunnes virran merkkivalo  vihreänä. Tämä vie noin 3 sekuntia. Tilan merkkivalo  vilkkuu keltaisena kunnes kuulokojeet on yhdistetty.

Kytkeä pois päältä:

- ▶ Pidä painiketta  painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

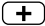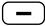Paina lyhyesti  tai  säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Kuulokojeidesi tyypistä riippuen äänenvoimakkuutta voidaan säätää seuraavasti:

- Vaihtoehto 1: Suoratoistettaessa ääntä StreamLine Mic-kuulokojeesta tulevaa ääntä (puhelu, puhe tai musiikki) säädetään. Kun ääntä ei suoratoisteta, kuulokojeiden äänenvoimakkuutta säädetään.
- Vaihtoehto 2: StreamLine Mic -kuulokojeesta tulevaa ääntä (puhelu, puhe tai musiikki) sekä äänenvoimakkuutta säädetään.

Kuulokojeen mikrofonien mykistäminen

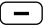Voit mykistää  kuulokojeen mikrofonit pitämällä painikkeen painettuna 3 sekunnin ajan. Kuulokojeissasi kuuluu vain StreamLine Micin ääni.

Kuulokojeidesi tyypistä riippuen voit poistaa kuulokojeiden mikrofonien mykistyksen seuraavasti:

- Vaihtoehto 1: Voit mykistää  painettuna 3 sekuntia.
- Vaihtoehto 2: Paina lyhyesti .

Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä, kun StreamLine Mic -kuulokojetta käytetään etämikrofonina.

1 Puhelujen soittaminen

Edellytykset: StreamLine Micin on oltava liitettyinä älypuhelimeen ja sen on oltava puettu oikein.

StreamLine Micin pitäminen oikein






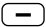
Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi StreamLine Micia on pidettävä kuvissa näytetyllä tavalla. On tärkeää, että StreamLine Micin mikrofoni osoittaa kohti suuta ja että vaatteet tai muut sellaiset eivät peitä StreamLine Micia.

Etäisyys korkeintaan:


- Älypuhelin — StreamLine Mic: 10 m
- Kuulokojeet — StreamLine Mic: 2 m

Puhelun vastaanottaminen

Kuulet soittoäänen kuulokojeesi kautta. Tilan merkkivalo  vilkkuu vihreänä.


- ▶ Vastaa/katkaise puhelu painamalla lyhyesti  tai vastaa/katkaise puhelu älypuhelimellasi.
Tilan merkkivalo palaa puhelun aikana  vihreänä.
- ▶ Hylkää puhelu pitämällä  painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen

Kun soitat liitetyllä älypuhelimellasi puhelun, se suoratoistetaan automaattisesti kuulokojeissasi. Tilan merkkivalo palaa puhelun aikana  vihreänä.


Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun StreamLine Micia käytetään etämikrofonina.

Lisätietoja

- **Äänivalinta:** Kun koje on kytketty älypuhelimeen, paina painiketta  kahdesti käyttääksesi äänivalintaa (jos älypuhelin tukee sitä).
- Tällaista yhteyttä varten StreamLine Mic käyttää Bluetoothin HFP-profilia (Hands-Free Profile).

② Musiikin kuuntelu

Jos StreamLine Mic on liitetty musiikkisoittimeen Bluetoothn kautta, musiikki toistetaan automaattisesti kuulokojeissasi. Tämä ei edellytä mitään StreamLine Mic-toimia.

Tilan merkkivalo palaa oranssina, kun musiikkia  suoratoistetaan.

Etäisyys korkeintaan:

- Musiikkisoitin — StreamLine Mic: 10 m
- Kuulokojeet — StreamLine Mic: 2 m

Musiikinsoiton aloittaminen/lopettaminen

- ▶ Aloita tai lopeta musiikinsoitto älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi avulla.

Musiikinsoiton voi lopettaa myös painamalla lyhyesti


 kohdassa StreamLine Mic.

Lisätietoja


- Tällaista yhteyttä varten StreamLine Mic käyttää Bluetoothin A2DP-profiilia (Advanced Audio Distribution Profile).
- Jos musiikkia suoratoistetaan älypuhelimesta, tulevista puhelusta ilmoitetaan musiikinsoiton lomassa.

③ Käyttäminen etämikrofonina

Etämikrofonitoiminto ei käynnisty automaattisesti.

Etämikrofonitila on otettava käyttöön  painikkeella.

StreamLine Micin pitäminen oikein

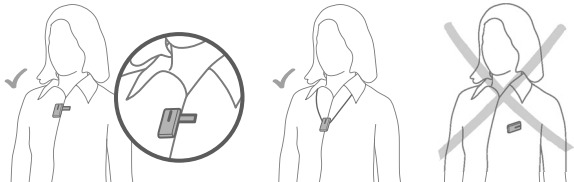


Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi puhujan tulee pitää StreamLine Micia kuvissa näytetyllä tavalla. On tärkeää, että mikrofoni osoittaa kohti puhujan suuta ja että vaatteet tai muut sellaiset eivät peitä StreamLine Micia.

Etäisyys korkeintaan:

- Kuulokojeet — StreamLine Mic: 20 m

Etämikrofonin kytkeminen päälle

▶ Paina  noin 3 sekunnin ajan.


Tilan merkkivalo  on purppuranpunainen.

Kuulokojeissasi kuuluu vahvistusääni.

Etämikrofonit kytkeytyvät päälle. StreamLine Micia käyttävän henkilön puhe suoratoistetaan kuulokojeissasi.

Etämikrofonin kytkeminen pois päältä

- ▶ Pidä painiketta  painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Tilan merkkivalo  on sininen (liitetty älypuhelimeen) tai keltainen (ei liitetty älypuhelimeen).

Lisätietoja

- Kun StreamLine Micia käytetään etämikrofonina, yhteyttä älypuhelimeen ei ole. Saapuvista puheluista ei tällöin ilmoiteta.
- StreamLine Micissa on suuntamikrofonit, jotka havaitsevat ääntä tietystä suunnasta.


④ Käyttäminen kauko-ohjaimena

StreamLine Micia voidaan käyttää myös kuulokojeiden kauko-ohjaimena: Voit säätää äänenvoimakkuutta (katso osa ”Äänenvoimakkuuden säätäminen”), mykistää kuulokojeiden mikrofonit (katso osa ”Kuulokojeen mikrofonien mykistäminen”) tai vaihtaa seuraavaan kuulo-ohjelmaan (katso alta).

Etäisyys korkeintaan:

- Kuulokojeet — StreamLine Mic: 2 m

Seuraavaan kuulo-ohjelmaan vaihtaminen

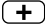- ▶ Pidä painiketta  painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun StreamLine Micia käytetään etämikrofonina.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Henkilöturvallisuus



VAROITUS

Tukehtumisvaara!

Kojeesi sisältää pieniä osia, jotka on mahdollista niellä.

- ▶ Säilytä kuulokojeet, paristot ja lisävarusteet poissa lasten ja kehitysvammaisten henkilöiden ulottuvilta.
- ▶ Mikäli osat ovat joutuneet niellyiksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan.



VAROITUS

Kuristumisvaara!

- ▶ Varmista, ettei kantohihna tartu kiinni mihinkään, esim. koneiden liikkuviin, mekaanisiin osiin.
- ▶ Käytä vain toimitukseen kuuluvaa, irtoavaa kantohihnaa. Se irtoaa automaattisesti tarttuessaan johonkin.
- ▶ Älä anna alle 12-vuotiaiden lasten käyttää kantohihnaa.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- ▶ Älä käytä selkeästi vaurioitunutta kojetta, vaan palauta se ostopaikkaan.



VAROITUS

Huomaa, että tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset saattavat vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoa.

- ▶ Käytä vain hyväksytyjä osia ja lisävarusteita. Pyydä apua kuulokojeasiantuntijaltasi.
- ▶ Älä muokkaa tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- ▶ Jos tuotetta muokataan, tuotteen turvallinen käyttö on varmistettava asianmukaisesti testaamalla ja tarkastamalla.



VAROITUS

Paristojen lataamisen turvallisuus USB-liitännän kautta määräytyy ulkoisen laitteen mukaan.

- ▶ Jos USB-liitin liitetään pistorasiaan kytkettyyn laitteeseen, laitteen on oltava UL-hyväksytty tai standardin IEC 60065, IEC 60950 tai muiden vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.



VAROITUS

Laitteen käyttöturvallisuus määräytyy ulkoisen laitteen mukaan, kun se on liitetty ulkoiseen laitteeseen (lisäkaapelilla, USB-kaapelilla tai suoraan).

- ▶ Jos laite liitetään pistorasiaan kytkettyyn ulkoiseen laitteeseen, laitteen on oltava standardin IEC 60065, IEC 60950 tai muiden vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.



VAROITUS

Räjähdyksvaara, kun ladattavaa paristoa käsitellään väärin.

- ▶ Älä oikosulje, puhkaise, murskaa tai pura ladattavaa paristoa.
- ▶ Älä laita uuniin tai avotuleen.
- ▶ Älä upota sitä veteen.
- ▶ Lataa ladattava paristo 0 °C – 45 °C lämpötilassa.
- ▶ Palauta laite kuulokojeliikkeeseen ladattavan pariston korjausta tai vaihtoa varten.



VAROITUS

Aktiiviset implantit

- ▶ Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava varovaisuutta. Jos sinulla on aktiivinen implantti, keskustele implantoidun laitteen valmistajan kanssa saadaksesi tietoa häiriöriskistä.



VAROITUS

Tämä koje saattaa häiritä mittauslaitteita ja elektroniikkalaitteita.

- ▶ Älä käytä kojetta lentokoneissa tai alueilla, joilla käytetään herkkiä tai elämää ylläpitäviä elektroniikkalaitteita.



VAROITUS

Räjähdysvaara!

- ▶ Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. kaivostyöalueilla).

Tuoteturvallisuus



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita äärimmäiseltä kuumuudelta. Älä jätä kojeita suoraan auringonvaloon.



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita korkealta kosteudelta.



HUOMAA

- ▶ Älä kuivaa kojeita mikroaaltouunissa.



HUOMAA

Eri tyyppinen vahva säteily esim. röntgentutkimuksen tai magneettikuvauksen aikana tai joutokäynnillä olevan magneettikuvauslaitteen tai CT-skannauslaitteen lähellä oltaessa saattaa vaurioittaa laitteita.

- ▶ Älä käytä laitteita näiden tai muiden samankaltaisten toimenpiteiden aikana. Heikompi säteily esim. radiolaitteistosta tai lentokentän turvallisuuslaitteista ei vaurioita laitteita.



Joissain maissa on olemassa rajoituksia koskien langattoman laitteen käyttöä.

► Pyydä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.



HUOMAA

Laitteet on suunniteltu kansainvälisten standardien mukaisiksi sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta, mutta häiriöitä lähellä olevien elektroniikkalaitteiden kanssa saattaa ilmetä. Siirry tässä tapauksessa pois päin häiriön lähteestä.

Tärkeitä tietoja

Käyttötarkoitus / Tarkoitettu käyttö

Tämä laite on tarkoitettu äänen, puhe ja langattomat audiolaitteet mukaan lukien, langattomaksi vastaanottimeksi ja lähettimeksi kuulokojeiden ja ympäristön välillä.

Lisäksi laite antaa langattomien kuulokojeiden käyttäjille mahdollisuuden hallita kuulokojeensa toimintaa.

Laite on tarkoitettu kuulokojeita käyttäville lapsille (> 36 kuukauden ikäiset lapset) ja aikuisille.

Tilan ja virran merkkivalon yleiskatsaus

Tilan merkkivalo



Kuvaus



Vilkkuva keltainen

Etsii kuulokojeita.



Keltainen

Lepotila: Liitetty kuulokojeisiin. **Ei** liitetty älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen.



Vilkkuva sininen

StreamLine Mic näkyy älypuhelimelle yhdistämistä varten.



Kuvaus



Sininen

Puhelintila: Liitetty älypuhelimeen.



Vilkkuva vihreä

Saapuva puhelu.



Vihreä

Puhelu kesken.



Oranssi


Musiikin suoratoisto.



Purppuranpunainen




Etämikrofonitila.

Kuvaus

-  Vilkkuva purppuranpunainen
Yhteyden luominen uudelleen etämikrofoniin.
-

Virran merkkivalo

Kuvaus

-  Punainen
Virta on vähissä.
 -  Vilkkuva vihreä
Lataa, päällä.
 -  Hiipuva vihreä
Lataus on valmis ja StreamLine Mic kytetään päälle.
-

Kuvaus



Vihreä

Päällä, ei lataa.



Vilkkuva oranssi

Lataa, pois päältä.



Oranssi

Lataus on valmis ja StreamLine Mic kytketään pois päältä.

Symbolien selitykset

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit



Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa johtaa vakaviin, keskivaikeisiin tai pieniin vammoihin.



Ilmoittaa mahdollisesta omaisuusvahingosta.



Neuvoja ja vihjeitä kojeen parempaan käsittelyyn.

Symbolit laitteessa tai pakkauksessa



CE-yhdenmukaisuusmerkintä, vahvistaa tiettyjen EU-direktiivien noudattamisen, katso osa ”Vaatimustenmukaisuustiedot”.

Symbolit laitteessa tai pakkauksessa



Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja radioliikenteen yhdenmukaisuusmerkintä, Australia, katso osa ”Vaatimustenmukaisuustiedot”.



Ilmoittaa laitteen laillisen valmistajan.



Älä hävitä kojetta tavallisen talousjätteen mukana. Lue lisää osasta ”Tietoa hävittämisestä”.



Lue ja noudata käyttöohjeen ohjeita.

Huolto ja hoito



HUOMAA

- ▶ Älä pane laitetta veteen!
- ▶ Älä puhdista laitetta alkoholilla tai bensiinillä.
- ▶ Puhdista laite tarvittaessa pehmeällä liinalla.
- ▶ Vältä hankaavia puhdistusaineita, joissa on lisäaineita, kuten sitruunahappoa, ammoniakkia jne.



Tekniset tiedot

Yhteensopivat kuulokojeet

StreamLine Mic toimii tiettyjen langattomien kuulokojeittemme kanssa. Kuulokojeasiantuntijasi kertoo sinulle yhteensopivista malleista.

Käyttö-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet

Käyttöolosuhteet

Lämpötila	5–40 °C
Suhteellinen kosteus	15–93 %, ei kondensoitumista
Ilmanpaine	700–1 060 hPa

Noudata seuraavia olosuhteita pitkien kuljetus- tai säilytysaikojen osalta:

Kuljetus ja säilytys

Lämpötila	-20–70 °C
Ilmanpaine	700–1 060 hPa



VAROITUS

Loukkaantumisen, tulipalon tai räjähdyksen vaara.

- ▶ Lähetä StreamLine Mic paikallismääräysten mukaisesti.

Muita osia, kuten kuulokojeita, saattavat koskea muut ehdot.

Virtalähteen tekniset tiedot

Syöttöjännite:	100–240 V AC
Syöttövirta:	enint. 0,2 A, 100 V AC
Syöttötaajuus:	47–63 Hz
Ulostulojännite:	5 V DC
Lähtövirta:	enint. 1 A

Tietoa hävittämisestä

Kierrätä laitteet, lisävarusteet ja pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustiedot

CE-merkinnällä ilmoitetaan, että tuote on seuraavien EU-direktiivien ja säädösten mukainen:

- 2017/745 koskien lääkinnällisiä laitteita
- 2014/53/EU koskien radiolaitteita
- 2011/65/EU koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista

Yhteensopivuusilmoitus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.wsaud.com/signia.


Langaton toiminto

Tässä laitteessa on radiolähetinvastaanotin, joka käyttää Bluetooth EDR:ää Bluetooth Low Energy (BLE) sekä omaa lyhyen kantaman radiotekniikkaa. Toimintataajuus

on 2,4 GHz. 2,4 GHz:n radiolähetin on heikko, ja sen kokonaissäteilyteho on aina alle 17 dBm EIRP.

Tämä laite on kansainvälisten radiolähettimiä, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ihmisaltistusta koskevien standardien mukainen.

FCC- ja ISED-vaatimustenmukaisuustiedot löytyvät laitteen takaa.

ACMA-yhdenmukaisuusmerkintä  osoittaa, että tuote on Australian viestintä- ja mediaviranomaisen (ACMA) asettamien sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien mukainen.

FCC-merkinnällä merkityt laitteet ovat FCC-standardien mukaisia koskien sähkömagneettisia häiriöitä.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003:n mukainen.

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 ja ISED:n lisenssivapaus-RSS:n mukainen.

Käyttö on seuraavan kahden ehdon alaista:

- Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä, ja
- laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC-määräysten osan 15 mukaan. Nämä rajat on suunniteltu takaamaan asianmukainen suoja vahingollisilta häiriöiltä, jos laite asennetaan asuinrakennukseen. Tämä laitteisto luo,

käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeita noudattaen, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioliikenteessä. Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotossa, minkä voi todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön poistamista jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Vaihda vastaanottoantennin suuntaa tai sijaintia.
- Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite eri pistorasiaan tai virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-tekniikolta.

FCC-huomautus: Muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta.

 **Laillinen valmistaja**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Tanska

Document No. 03384-99T05-7300 FI

Order/Item No. 109 520 34

Master Rev05, 08.2024

www.wsaud.com

© 10.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net